

## SISTEMA DE CONTENCION ABDOMINAL Y PERINEAL UNIVERSAL EV200 – EV210

### Finalidad:

Los cinturones de contención Evoluxion son dispositivos diseñados para mejorar la estabilidad y seguridad de una persona en una silla de ruedas o en un sillón. Este tipo de cinturones tiene múltiples funciones y beneficios:

1. Seguridad y prevención de caídas: El cinturón de sujeción ayuda a mantener a la persona segura en su silla de ruedas o sillón, evitando deslizamientos o caídas accidentales, especialmente en personas con movilidad reducida o debilidad muscular.
2. Estabilidad y postura: el cinturón también puede proporcionar soporte adicional para mantener una postura adecuada. Ayuda a evitar que la persona se desplace hacia adelante o se desestabilice, lo que es especialmente importante para quienes tienen dificultades para mantener el equilibrio.
3. Sujeción perineal: El componente perineal del cinturón puede evitar que la persona se deslice hacia el frente o se desestabilice, especialmente cuando la persona está en una posición sentada durante un período prolongado.
4. Mayor comodidad: Al mantener al usuario en una posición más estable, puede reducir el malestar o la incomodidad que surge de moverse dentro de la silla.
5. Facilita la atención: En algunos casos, este tipo de cinturón también puede ayudar a los cuidadores a facilitar el transporte o manejo de la persona, proporcionando un punto de sujeción adicional sin causar incomodidad.

### Características:

Cinturón universal: válido para todo tipo de sillas de ruedas y sillones. Dispone de un prolongador para adaptar el cinturón de la silla de ruedas al sillón.

#### Modelos:


EV200 – Abdominal: Dispone de un prolongador

EV210 – Perineal: Dispone de dos prolongadores

Repuesto de hebilla fácilmente sustituible.

Composición: Laminado gris 100% poliéster

Tamaño: Universal

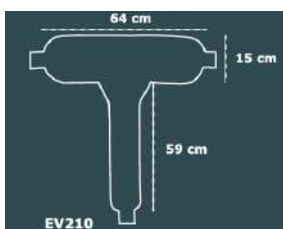

**Lote:** Ver embalaje

**Color:** Gris

**Fecha de fabricación:** Ver embalaje

**Modelo:** EV200, EV210

**Marca:** EvoSense

### Mantenimiento y almacenamiento:

Lavar a mano a temperatura máxima de 40 grados. Secar en posición horizontal. Evitar fuentes de calor. No usar lejías ni productos abrasivos. No secar en secadora, secar al natural. No usar lejía; No planchar.

### Instrucciones de uso:

Cinturón de seguridad para sillas de ruedas y sillón, con un sistema de correas ajustables muy cómodas y fáciles de usar. Cómodo de usar gracias a su rápida y fácil instalación.

1- Colocar la parte acolchada del cinturón sobre el abdomen del usuario, lo más centrado posible y abrochar en la parte trasera de la silla de ruedas o sillón la cinta mediante la hebilla.

2- Ajustar con los pasadores

3- En caso de utilizar en un sillón, colocar el prolongador y realizar los pasos anteriores.

4- En el caso de utilizar el cinturón perineal, además de ajustar la parte abdominal en primer lugar. Pasar la parte perineal entre las piernas, por debajo y sacar por la ranura de la silla de ruedas o pasar por debajo del sillón. Cerrar con la hebilla y ajustar.

### Imágenes del producto:



**Evoluxion Health, Lda**

Rua Hermano Neves 18- 3º Piso – E7  
1600-477 Lisboa, Portugal

+351 925 568 105

✉ export@evoluxionhealth.com

**Green Visco Spain, S.L.**

Avda Jose Maria Alcaraz y Alenda, Num.2, Esc. 1, Planta 1, Puerta 1  
06011 – Badajoz, España

+34 634 058 47

✉ comercial@greenvisco.com